

NEAUVIA

RETHINKING
MEDICAL
AESTHETICS



NEAUVIA®

Fillers

Neauvia on moderni täyteainesarja, joka erottuu muista markkinoilla olevista tuotteista erityisesti sen puhtauden ja kestävyysden ansiosta. Neauvian tuotteissa käytetään PEG-ristiinsidosteknologiaa, mikä tekee tuotteista hyvin siedettyjä, joustavia ja luonnollisen tuntuisia ihollla.

PEG (polyeteeliliglykoli) on tunnettu "naamioivista" ominaisuuksistaan (PEGylaatio). Se auttaa hyaluronihappoa välttymään elimistön immuunivasteelta, mikä vähentää merkittävästi viivästyneiden tulehdusreaktioiden kuten granuloomien tai turvotusten riskiä.

Koska Neauvia ei käytä BDDE-ristiinsidontaa, tuotteessa ei ole jäänteitä, jotka voisivat aiheuttaa herkistymistä tai toksisia reaktioita.

PEG itsessään on täysin bioyhteensopiva ja hajoaa elimistössä turvallisesti.

Lisäksi PEG-ristiinsidottu hyaluronihappo kestää lämpöä paremmin kuin BDDE-pohjaiset aineet. Tämä on merkittävä etu ammattilaisille: Neauvia-hoitoja voidaan yhdistää energiapohjaisiin laitehoitoihin (kuten laser-, RF- tai HIFU-hoidot) ilman, että täyteaine hajoaa ennenaikaisesti.



NEAUVIA®

Fillers

INTENSE Rheology



HA-pitoisuus: 22 mg/ml

Rheologia: Matala viskositeetti ja korkea levittäytyvyys.

Erinomainen integraatio pintakudokseen.

Injektointisyvyys: Pinnallinen tai keskisyvä dermis.

Käyttökohteet: Pinnalliset rypyt (esim. perioraalialue), huulten syväkosteutus, hienot juonteet ja silmänympärysalueen kevyt korjaus.

INTENSE Flux



HA-pitoisuus: 26 mg/ml

Reologia: Korkea pitoisuus yhdistettynä matalaan viskoelastisuuteen (G'). Flux on suunniteltu "notkeaksi" ja helposti injektoitavaksi, vaikka sen hyaluronihappopitoisuus on korkea. Se tarjoaa erinomaisen diffuusion (levittyvyyden) kudoksessa säilyttäen silti volyymivaikutuksen.

Injektointisyvyys: Keskisyvä tai syvä dermis.

Käyttökohteet: Kasvojen alueet, jotka vaativat luonnollista volyymia ilman liiallista jäykkyyttä. Ihanteellinen dynaamisille alueille, joissa täyteaineen on mukauduttava ilmeisiin, sekä huulten hienovaraiseen muotoiluun ja kasvojen keskiosan kevyeen täyttöön.

NEAUVIA®

Fillers



INTENSE Lips

HA-pitoisuus: 24 mg/ml

Reologia: Erityinen joustavuus (elastisuus); suunniteltu mukautumaan huulten dynaamiseen liikkeeseen ilman epäluonnollista tuntua.

Injektointisyvyys: Huulen limakalvo tai dermis.

Käyttökohteet: Huulten muotoilu, volyymin lisäys ja rajojen korostaminen.



INTENSE LV

HA-pitoisuus: 26 mg/ml

Rheologia: "Low Viscosity" – tasapainoinen yhdistelmä muovautuvuutta ja nostokykyä. Optimaalinen diffuusio kudokseen.

Injektointisyvyys: Syvä dermis.

Käyttökohteet: Keskisyvät uurteet, maltillinen volyymin lisäys ja kudoksen täyttö alueilla, joissa kaivataan luonnollista pehmeyttä.

NEAUVIA®

Fillers



INTENSE/INTENSE Man

HA-pitoisuus: 28 mg/ml

Rheologia: Korkea viskoelastisuus (G') ja erinomainen koheesio. Sarjan voimakkain nostokyky ja rakenteellinen tuki.

Injektointisyvyys: Syvä dermis tai supraostiaalinen (luun pinta).

Käyttökohteet: Kasvojen volyymin palauttaminen, syvät nasolabiaalipoimut, leukalinjan ja poskipäiden muotoilu.



INTENSE Rose

HA-pitoisuus: 28 mg/ml

Rheologia: Erittäin korkea viskoelastisuus ja koheesio. Suunniteltu kestäämään kovaa mekaanista painetta pehmytkudoksessa.

Injektointisyvyys: Syvä dermis tai pehmytkudos.

Käyttökohteet: Intiimialueiden korjaukset ja muotoilu, joissa vaaditaan maksimaalista kestävyyttä.

NEAUVIA®

Fillers




STIMULATE/ STIMULATE Man

HA-pitoisuus: 26 mg/ml (sisältää lisäksi 1 % CaHA – kalsiumhydroksyyliapatiittia).

Rheologia: Korkea koheesio ja mekaaninen tuki, joka yhdistyy pitkäkestoiseen kollageenistimulaatioon.

Injektointisyvyys: Syvä dermis.

Käyttökohteet: Veltostuneen ihon kiinteytys, kasvojen piirteiden muotoilu ja kämmenselkien nuorentaminen.

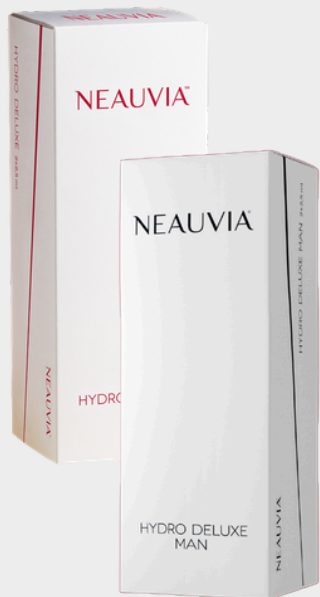

HYDRO Deluxe/ HYDRO Deluxe Man

HA-pitoisuus: 18 mg/ml (ei ristiinsidottu, sisältää glysiiniä ja L-proliinia).

Rheologia: Juokseva, erittäin matala viskositeetti.

Suunniteltu diffunsoitumaan laajalle alueelle.

Injektointisyvyys: Pinnallinen dermis (mesoterapia/pienet pistokset).

Käyttökohteet: Ihon syväkosteutus, elastisuuden parantaminen ja mesoterapia-hoidot kasvoille, kaulalle ja dekolteelle.

NEAUVIA®

Fillers

NEAUVIA Fillers - A comprehensive range

	INTENSE LINE							STIMULATE LINE		HYDRO DELUXE LINE	
											
	INTENSE RHEOLOGY	INTENSE FLUX	INTENSE LV	INTENSE	INTENSE LIPS	INTENSE MAN	INTENSE ROSE	STIMULATE	STIMULATE MAN	HYDRO DELUXE	HYDRO DELUXE MAN
CROSSLINKING	PEG	PEG	PEG	PEG	PEG	PEG	PEG	PEG	PEG	Non-crosslinked	Non-crosslinked
HYALURONIC ACID CONTENT	22 mg/ml	26 mg/ml	26 mg/ml	28 mg/ml	24 mg/ml	28 mg/ml	28 mg/ml	26 mg/ml	28 mg/ml	18 mg/ml	18 mg/ml
AMINO ACIDS	Glycine and L-Proline	Glycine and L-Proline	Glycine and L-Proline	Glycine and L-Proline	Glycine and L-Proline	Glycine and L-Proline	Glycine and L-Proline	Glycine and L-Proline	Glycine and L-Proline	Glycine and L-Proline	Glycine and L-Proline
CALCIUM HYDROXIAPATITE	-	-	-	-	-	-	-	CaHA	CaHA	CaHA	CaHA
INJECTION PROFILE											
SYRINGE	1 x 1 ml	1 x 1 ml	1 x 1 ml	1 x 1 ml	1 x 1 ml	1 x 1 ml	1 x 1 ml	1 x 1 ml	1 x 1 ml	2 x 2.5ml	2 x 2.5ml
NEEDLE/ CANNULA	27 G -	27 G / 30 G -	21 G 22 G	21 G 22 G	27G -	21 G 22 G	21 G 22 G	21 G 22 G	21 G 22 G	30 G -	30 G -
DURATION	6 months degradation average time ¹	6 months degradation average time ¹	6 months degradation average time ¹	6 months degradation average time ¹	6 months degradation average time ¹	6 months degradation average time ¹	The product degrades slowly after implanting ¹	6 months degradation average time ¹	6 months degradation average time ¹	Up to 4 weeks, 2 weeks average time ¹	Up to 4 weeks, 2 weeks average time ¹
AREA OF INJECTION	Face	Face	Face	Face	Lips	Face	Labia majora	Face	Face	Face and neck	Face and neck
INJECTION PLANE	Intradermal and/or subcutis	Intradermal and/or subcutis	Intradermal and/or subcutis	Subcutis and/or over the periosteum	Vermilion and/or perioral area	Subcutis and/or over the periosteum	Intradermal	Subdermis and/or over the periosteum	Subdermis and/or over the periosteum	Epidermis and dermis	Epidermis and dermis
INJECTION PLANE ILLUSTRATION											

¹ Data on file.
Intense Rheology, Intense Flux, Intense LV, Intense, Intense Lips, Intense Man, Stimulate, Stimulate Man, Hydro Deluxe and Hydro Deluxe Man are class II medical devices regulated under the EU MDR 2017/745 Regulation.
Intense Rose is a class II medical device regulated under the EU MDR 2017/745 Regulation. Manufacture: MATEX LAB SPA, via Carlo Urbani 2 ang, via Enrico Fermi, Bimbi, Italy. Please carefully read the instructions in the leaflets.
The use of these products requires the intervention of a healthcare professional. Only to be used by physicians in accordance with local legislation, trained in the injection techniques on Hyaluronic Acid based fillers.



Stimulate, has been recognized as the "Best Injectable Dermal Filler" at the AMWC 2024 Awards. This prestigious international recognition for this groundbreaking product, the only PEG-HA + CaHA filler in the market, reaffirms Neauvia's dedication to rethinking medical aesthetics.